

JUL-OG NYTTÅRSKAMPANJE 2025/26

BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

ALT TIL NATURFAGET



NÅ 5907,-

Elektrisitetskoffert CVK
med norsk veiledning

106003

NOK 6950



NÅ 2340,-

Digital mikroskop / stereolupe
med LCD skjerm

310230

NOK 3120



NÅ 1855,-

Skjelett,

301014

NOK 2650



NÅ 779,-

Solsystemet med motor og lys

701013

NOK 950



NÅ 49,-

Introduksjonspris på våre kjemissett
kun kr. 49,- per sett.

Mikroskop kamera



Nå har vi laget en pakke som inkluderer et basis mikroskop SFC100 FL LED, brukt i skolen i mange tiår, med et 3 MP okularkamera og programvare.

Kameraet kan brukes med andre mikroskoper og stereoluper.

Inkludert:




- Okularkamera USB 3MP (Varenr.: 310221)
- Mikroskop 100 FL LED (Varnr.: 307003)

Mikroskop SFC-100FL LED med okularkamera 3 MP

310216

NOK 2445

NÅ 1834,-

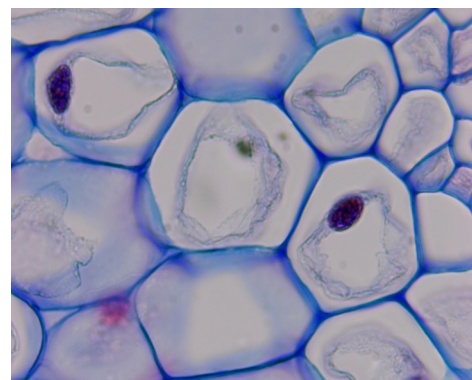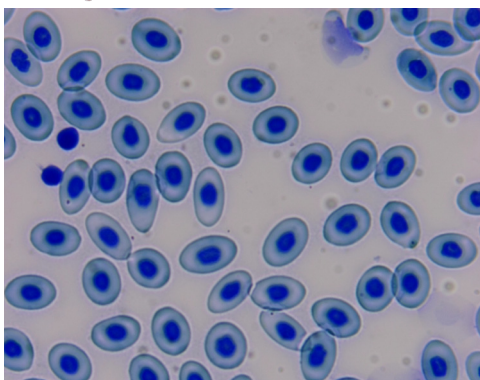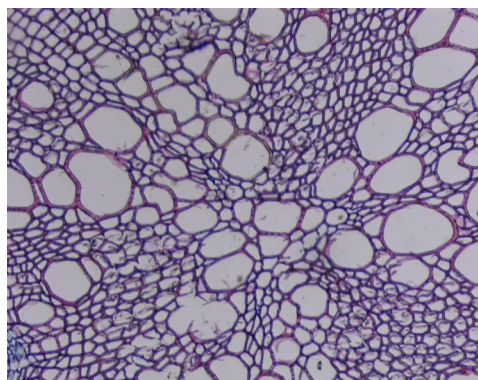

Bildene er tatt med SFC-100 FL LED og 3MP okularkamera



Okularkamera USB 3 MP

310221

NOK 950

NÅ 779,-

Inkludert:

- Okularkamera med 23,2 diameter
- 2 stk adaptere (Ø30mm og Ø30,5mm)
- 1 USB-kabel for tilkobling til PC
- Programvare (Image View)



Okularkamera USB 5 MP

310222

NOK 1290

NÅ 1058,-

Inkludert:

- Okularkamera med 23,2 diameter
- 2 stk adaptere (Ø30mm og Ø30,5mm)
- 1 USB-kabel for tilkobling til PC
- Programvare (Image View)



Skann QR-KODEN
og laste app

Mikroskop kamera

Kamera med LCD skjerm, til mikroskoper/stereoluper

310229

NOK 6990

Kamera med 10,5" berøringsskjerm som passer på de fleste stereoluper og mikroskoper.

10,5" LCD-berøringsskjerm med integrert 8MP/4K digitalkamera for mikroskoper og stereoluper. Kameraet plasseres i okulartubusen og vil fungere fint uansett om du bruker en av de skråstilte okulartubusene eller den vertikale som man har på et trinokulært mikroskop da det kan justeres trinnløst til den posisjonen man ønsker.

Kameraet kommer klart til bruk med programvare installert. Ved å koble til fysisk og slå på kameraet vil man automatisk få mikroskopbildet på skjermen. I tillegg finnes ikoner for blant annet å ta bilder, video, justere kontrast, hvitbalanse. Man kan også legge inn kommentarer, trådkors, linjal og gjøre målinger i bildet. På baksiden av kameraet finnes kontakter for tilkobling til PC via USB eller HDMI for tilkobling til for eksempel projektor eller storskjerm.

Inkludert med kameraet er nettdapter og adaptere for mikroskop og stereolupe.



NÅ 5865,-



Mikroskopkamera HDMI/USB 5 MP inkl.adapter

310224

NOK 6490

Nytt mikroskopkamera hvor du kan koble direkte til HDMI (kabel inkludert) og få bilde i høyeste kvalitet på storskjerm uten programvare! I tillegg kan du bruke USB-utgang (kabel inkludert) og ved hjelp av programvare se bildet på storskjerm, ta bilde eller video og sende som filer for bruk i presentasjoner, rapporter eller sosiale media. Programvaren har mange redigeringsmuligheter og filene kan også lagres på SD-kort for bruk i andre applikasjoner.

Inkludert:

- 1 x Kamera
- 1 x Strømkabel
- 1 x USB-mus
- 1 x HDMI-kabel
- 1 x USB-minne med programvare
- 1 x SD-kort (8GB)
- 1 x Justerbar adapter



NÅ 4868,-



Mikroskop

Mikroskop Fokus

307005	monokulært	NOK 2590	NOK 2202
307006	binokulært	NOK 2950	NOK 2360
307007	trinokulært	NOK 3450	NOK 2932

Vår Fokusserie er populær både i grunnskolen og i videregående skole. Har alt en kan forvente av et godt skolemikroskop, og finnes i mono, bino og trinokulær utgave. Det trinokulære mikroskopet brukes primært hvis man ønsker et kamera tilkoblet.

Alle modeller kommer med regulerbart LED-lys, 4,100,400 og 600x forstørrelse, lavhengende kryssbord og grov- og finfokusering på samme ratt. For ytterligere info, se www.labdidakt.no



Mikroskop Bioblue monokulært digital 5 MP USB-2.0

307136	NOK 9790
--------	----------


Et utmerket demomikroskop med innebygget kamera fra nederlandske Euromex. Solid mekanisk oppbygging og flott finish. Sammen med 10 x WF okularer og fire semiplanobjektiver har du 40,100,400 og 600x forstørrelse. Mikroskopet kan også leveres med 100x objektiv for 1000x forstørrelse. Lavhengende kryssbord gjør det enkelt å flytte preparatet. Regulerbart LED-lys kombinert med abbekondensor og trinnløs irisblender gir deg akkurat riktig lysmengde for de ulike preparater og forstørrelser. Inkludert er oppladbare Li-ion batterier som frigjør deg fra kabelen.



NÅ 723,-

Biologi, grunnsett for skolen,
10 mikropreparater, Lieder

307154	NOK 850
--------	---------

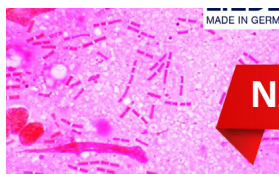

NÅ 723,-

Biologi, Bakterier,
10 mikropreparater, Lieder

307155	NOK 850
--------	---------



NÅ 723,-

Biologi, Livet i en vanddråpe,
10 mikropreparater, Lieder

307157	NOK 850
--------	---------



Arterie og vene, 15 stk

307076	NOK 275
--------	---------

NÅ 234,-



Blodutstryk, 15 stk

307077	NOK 275
--------	---------

NÅ 234,-



Mitose, 15 stk

307075	NOK 275
--------	---------

NÅ 234,-



Sædceller, 15 stk

307067	NOK 275
--------	---------

NÅ 234,-

Mikroskop og Stereoluper

Digital mikroskop / stereolupe med 7 tommer LCD skjerm

310230

NOK 3120

One-touch foto- og videoopptak for mer levende og engasjerende mikroskopisk læring.

Innebygd batteri for større bekvemmelighet utendørs. Enkel betjening – lett å lære på et øyeblikk. Ingen kompliserte oppsett eller justeringer nødvendig – klar til bruk rett ut av esken med enkel fokusering.

Sammenleggbar skjerm. Kobles til telefonen din via Wi-Fi for enkel mikroskopkontroll gjennom appen.

- 7-tommers sammenleggbar skjerm
- Med 5 MP Aptina CMOS-sensor
- 3 objektiver: 4x/10x/40x
- Skjermforstørrelse: 54x/135x/540x
- LED-belysning for innfallende og gjennomskinnende lys,justerbar
- HDMI-utgang (til TV eller skjerm)
- USB-kontakt
- Inkluderer ett 8 GB micro SD-kort
- 1 stk. 2000 mAh oppladbart batteri

NYHET!

NÅ 2340,-




Stereolupe Mini

307021

NOK 590

NÅ 425,-

Dette er en flott stereolupe for de yngste elevene elevene og kan gjerne brukes som feltlupe. LED-lyset drives av to AA-batterier, lupe gir 20x forstørrelse og fokuseringen er enkel, men presis. Ta en titt på bildene vi har tatt med denne lupa. Kikk gjerne på livet i en vannprøve som du legger i en liten petriskål (inkludert) eller liknende. Batterier er inkludert.

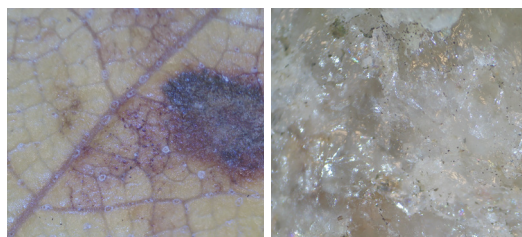

Bildene er tatt med HDMI kamera 310224

Overflate av blad og stein



Stereolupe Fokus 10x, 20x og 40x

307045

NOK 2290

For de som ønsker seg opp til 40x forstørrelse, men fortsatt vil ha flere alternativer er dette lupen. 10, 20 og 40 x forstørrelse, solid mekanisk konstruksjon og regulerbart LED-lys gir deg skarpe bilder og meget god dybdeskarpheit.



NÅ 1947,-

Stereolupe 40B, 10x/30x

307024

NOK 1890

For yngre elever kan store forstørrelser gi utfordringer både med hensyn til fokusering og å forstå det man ser på. Dette er derfor en god modell, med solid utførelse, over- og underlys, og 10/30x forstørrelse med semigjennomsiktig skive og kontrastskive.



NÅ 1455,-

PASCOs trådløse sensorer er et funn for naturfaget. Gratis norsk app (SPARKvue), norske veiledninger og videoer gjør utstyr enkelt i bruk. Passer perfekt for praktisk muntlig eksamen! Her er våre fem mest populære sensorer til grunnskolen.

Alle sensorer har innebygget minne og kan logge i timer, dager og uker!

En god allround temperatursensor som måler fra -40 til 125 grader C. Strøm temperaturdata til skjermen i sanntid, logg data til sensorens minne eller bruk den i koding! I appen er det enkelt å vise målingene grafisk, digitalt eller i tabell. Eksporter data og bruk det i Geogebra eller Python, mulighetene er mange! Finnes nå både med og uten display.

Temperatursensor med display, trådløs

PS-4201

NOK 1995



Temperatursensor, trådløs

PS-3201

NOK 1560



Bevegelsessensor, trådløs

PS-3219

NOK 3173

En perfekt sensor for alle som vil måle bevegelse. Gir deg posisjon, fart og akselerasjon. Bruk den til å demonstrere Newtons lover, energien til en ball som spretter eller med MatchGraph! «gå grafen, ikke planken».



Lys- og fargesensor, trådløs

PS-3248

NOK 1972

En sensor som måler lys, UV og farger! Bruk den på ekskursjon eller test solkrem, solbriller, og solceller! Hvorfor ser genseren rød ut? Ta opp stolpediagrammer som viser fordelingen av lys som absorberes eller emitteres.



Oksyngengassensor, trådløs

PS-3217

NOK 5092

Undersøk oksygenkonsentrasjon, luftfuktighet og lufttemperatur med en sensor. Fin i fotosynteseforsøk, respirasjon eller andre miljøforsøk. Med innebygget minne for langtidslogging og inkludert eget prøvekammer.



pH-sensoren kommer nå både med og uten display. Fin å ha med på ekskursjoner, til å teste kranvann eller regnvann. Med innebygget minne kan du også langtidslogge vannet i skolens akvarium eller vise den spennende reaksjonen som skjer når Samarin løses i vann. Her går det fort, men sensoren fanger opp endringen i pH og gir deg resultatet i grafisk form! Kommer ferdig kalibrert og klar til bruk!

NÅ 2480,-

pH-sensor med display, trådløs

PS-4204

NOK 2850



NÅ 2048,-

pH-sensor, trådløs

PS-3204

NOK 2438



PASCO har utviklet mange fine STEM-produkter som alle kan kombineres med de andre PASCO-sensorene.

Det er både spennende og relevant å kombinere teknologi, koding og naturfag. Her viser vi et lite utvalg.

Drivhus Sensor og kontroll sett

ST-2997

NOK 12355

Komplett modell av et moderne drivhus med sensorer for overvåking av blant annet lys, luftfuktighet, temperatur og jordfuktighet. Plasser en plante i kammeret og styr vanntilførsel, lys og vifte for å opprettholde optimale vekstforhold. Test gjerne karse og ta bilder av utviklingen underveis. Hva hvis planten får lys hele tiden i forhold til naturlige endringer? Et ypperlig produkt for STEM-undervisning og koding i naturfaget! Norsk veiledning for detaljert bruk av hver enhet, inkludert kode.

NÅ 9266,-



Klimapakken

90036

NOK 10417

Kombiner fotosyntese og andre klimaforsøk i denne pakken som inkluderer et økokammer, Vi inkluderer ferdige forsøk både for måling og koding, både Blockly og Python. Sensorene kan selvsagt brukes også i andre forsøk og vil være et flott tilskudd til enhver naturfaglab.

Pakken inkludert:

- 1X CO₂-sensor PS-3208
- 1X Temperatursensor PS-3201
- 1X //code.Node PS-3231
- 1X Økokammer ME-6667

NÅ 8542,-



CO₂ sensor, trådløs

PS-3208

NOK 5379

Et «must» på enhver moderne naturfaglab! Mål CO₂ og inneliv i klasserommet eller når eddik reagerer med bakepulver. Vis ånding hos erter som spirer eller CO₂-utviklingen når sukker og gjær reagerer. Ikke minst, legg sensoren i en snaplåspose sammen med noen spinatblader og demonstrer fotosyntesen, i løpet av en skoletime! Med innebygget minne er sensoren fin til langtidsmåling.

NÅ 4680,-



Økokammer

ME-6667

NOK 1111

Et fleksibelt kammer med hull som passer til PASCOs sensorer. Plasser en grønn plante og vis fotosyntesen eller celleåndingen med PASCOs sensorer. Ved å fylle det med CO₂-gass (vann og Samarin) kan det også brukes til å vise global oppvarming. Inkluderer propper for å lage et lukket miljø under forsøket.

NÅ 977,-



//code.Node

PS-3231

NOK 2367

Koding i grunnskolen med en solid enhet som tåler elevbruk! Gjør målinger av blant annet lys, lyd, temperatur og bevegelse og bruk målingen som betingelser i kodingen. Styr blant annet en RGB-LED, en frekvensstyrt høyttaler eller en 5 x 5 LED-matrise. Kombiner gjerne med andre PASCO-sensorer som gir flere muligheter.

NÅ 1775,-



code.Node cart

PS-3235

NOK 1057

En smart liten cart som kombineres med //code.Node for eksperimenter med koding og bevegelse. Ruller nesten friksjonsfritt, enten på bordet eller på bane. Kombinert med //code.Node kan man måle både hastighet og akselerasjon og kombinere med output når gitte betingelser er nådd. Solid mekanisk konstruksjon som vil tåle mange års bruk.

NÅ 793,-



Skjelett, standardutførelse

301014

NOK 2650

Hodeskalle, armer og bein er avtagbare. Oppbygning og festeanordninger er utført slik at armer og bein lett kan beveges. Modellen leveres på stativ med hjul.

- Høyde: 170 cm
- Vekt: 7 kg

NÅ 1855,-



Øyemodell, delbar i 6 deler

301069

NOK 885

Modellen er 3x forstørret, er montert på stativ og kan deles i 6 deler. Ytterst er senehinne med hornhinne og øyemuskler, deretter årehinne med iris og netthinne og innerst linse og glasslegeme.

- Størrelse: 9x9 cm og 15 cm høy.
- Leveres med skriftlig oversikt over øyets enkelte deler.

NÅ 664,-



Øremodell, 3 deler, 3x forstørrelse

301077

NOK 748

Modellen er 3 ganger forstørret og gir mulighet for å studere ørets anatomi i detalj. Du kan ta ut trommehinne, hammer, ambolt og stigbøyle som en del, sneglehus og balanseorgan som en annen.

- Størrelse: 30 x 12 x 17 cm.

NÅ 636,-



Torso med åpen rygg, 17 deler

301002

NOK 3383

Deler som kan tas av er: venstre del av storehjernen, venstre del av lillehjernen, høyre og venstre lunge, hjerte (2-delt), lever, magesekk (2-delt), halve nyren, halve urinblæren, den 7. brystvirvelen, tynntarmen og tykktarmen (3-delt). Modellen er i full størrelse og er laget i plastmateriale av høy kvalitet.

NÅ 2470,-



Hjertemodell, stor, 3 deler

301041

NOK 1148

Modellen er stor og praktisk til demonstrasjon for elevene. Hjertemodellen kan deles i 3 deler.

NÅ 976,-



Linseboks 2,5x

304011	NOK 24
--------	--------

Lukket gjennomsiktig boks med linse i toppen. Egner seg meget godt til de yngste elevene.

- Diameter: 6,3 cm
- Høyde: 6,4 cm
- Forstørrelse: ca. 2,5 - 3 x med gitter i bunnen.



NÅ 17,-

Bordlupe 10x dia 30mm

304005	NOK 48
--------	--------

Utstyret er godt egnet til innendørs bruk på bord- eller benkeplate. Objektet holdes på plass og fokuseringsavstanden er fast.

- Forstørrelse: 10x
- Diameter: 30 mm



NÅ 35,-

Linseboks 3,5x

304013	NOK 21
--------	--------

Lukket gjennomsiktig boks med linse i toppen og ekstra linse som er avtagbar.

- Diameter 7cm og høyde 8cm.
- Linser: 2x og 3,5x



NÅ 16,-

Foldelupe LED, 30x

304008	NOK 138
--------	---------

En foldelupe kan brukes i alle sammenhenger der man vil betrakte de små detaljene. Det kan gjerne være deler fra en blomst, overflaten på en stein eller annet. God optisk kvalitet sammen med kraftig LED-lys gir deg uansett et klart og godt bilde.

- Forstørrelse: 30x
- Linse på hele 21 mm



NÅ 106,-

Linseboks med skala, 5x

304018	NOK 39
--------	--------

En linseboks i klar plast med skala i bunnen.

- Forstørrelse 5x.
- Diameter på linsen: 42 mm.



NÅ 34,-

Vannkikkert stor

305078	NOK 690
--------	---------

Profesjonell vannkikkert, delbar i tre deler og med ekstra stort vindu.

- Høyde: 51 cm
- Diameter på vindu: 33,5 cm



NÅ 607,-

Forstørrelsesglass med håndtak, Ø90 mm /4x

304020	NOK 32
--------	--------

Egner seg for elever i alle aldre.

- Forstørrelse på 4x.
- Linse med diameter 90 mm



NÅ 25,-

Vannkikkert liten

305079	NOK 425
--------	---------

Lett vannkikkert for de yngre elevene!

- Høyde: 41 cm
- Diameter på vindu: 20 x 17 cm



NÅ 374,-

Gassbrenner

803001

NOK 195

Standard gassbrenner for Coleman eller Primus ventil-boks. Enkel å skru av og på uten fare for søl av gass. Med ratt for justering av gass og ring for justering av lufttilførsel. Lavt tyngdepunkt gjør at ingen støttering er påkrevet. Brenneren selges uten boks.



NÅ 163,-

Gassboks for gassbrenner

803013

NOK 65

Gassboks Coleman med sikkerhetsventil for bruk sammen med gassbrenner (for eksempel 803001). Gassblanding propan/butan som passer godt for laboratoriebruk. Gassmengde 240 g.



NÅ 55,-

Trefot til laboriebrenner, høyde: 22,5


802056

NOK 95

Dette stativet brukes sammen med et keramisk trådnett (varenr.: 803000) og danner da et stativ hvor gassbrenner på gassboks kan plasseres under trådnettet og glassutstyr kan plasseres oppå.

Spesifikasjoner:

- Høyde på stativet er 22,5 cm (til toppen av ringen)
- Ringens diameter er 12,5 cm.

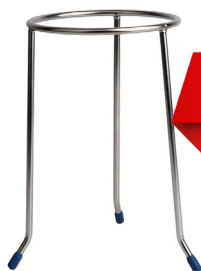


NÅ 78,-

Keramisk trådnett

803000

NOK 25

Brukes sammen med 802011 eller 802056 Trefot med ring og danner da et kokestativ. Nettet er kvadratisk med sider 15 cm. Asbestfritt keramisk materiale i midten med diameter 10 cm. Signert og stemplet sertifikat fra vår europeiske produsent vedlegges med leveransen.

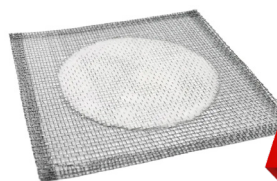

NÅ 20,-

Tørkestativ for rør og kolber, stor

809013


NOK 495

Stor og praktisk stativ med plass til å sette glassutstyr som reagensrør, kolber og begerglass til tørk etter rengjøring. Kan settes på bord eller henges på vegg. Med plastkar i bunnen for oppsamling av væske. Plass til 55 rør eller koble.

Spesifikasjoner:

- Bredde: 36cm
- Høyde: 62cm
- Dybde: 13cm

NÅ 371,-

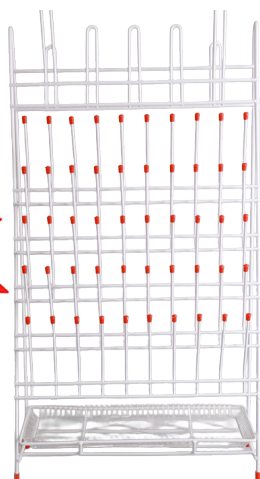

Reagensrørstativ, med 12 hull

802031

NOK 77

Slitesterkt reagensrørstativ i plastbelagt metall.

Stativet rommer 12 stk. reagensrør med diameter maks 20 mm.

Spesifikasjoner:

- Størrelse: 105x80x70 mm.



NÅ 59,-

Vekt, lommevekt 200 g/0,01 g

806009	NOK 195
--------	---------

Dette er en praktisk og liten vekt med LCD-panel med store tall. Veiepannen er beskyttet av et hengslet lokk og et lær-etui. Måle-verdiene kan vises i flere masse-enheter i tillegg til gram.

Spesifikasjoner:

- Størrelse: 120x70x20 mm.
- Veieområde: 0-200g.
- Nøyaktighet: 0,01g.

NÅ 148,-



Vekt, 300 g/0,01 g med hus, økonomi

806010	NOK 685
--------	---------

Prisgunstig vekt for kjemikurset eller hvor høy nøyaktig er på-krevet. Vekta har baklyst display og store lettlesle tall. Leveres inkludert veiehus (hull i lokket) for å unngå at luftens bevegelse-er påvirker målingen.

Spesifikasjoner:

- Veieområde: 0-300g
- Nøyaktighet: 0,01g

NÅ 486,-



Vekt, 1000 g/0,1 g økonomi

806026	NOK 240
--------	---------

Dette er en meget god digitalvekt som leveres ferdig kalibrert fra fabrikk. Vekta kan enkelt nullstilles og den innehar også tellefunk-sjon.

Spesifikasjoner:

- Veieområde: 0-1000g
- Nøyaktighet 0,1g
- Batterier er inkludert

NÅ 180,-



Vekt 620 g/0,1g , Kern stablebar

806036	NOK 595
--------	---------

En ny bestselger fra Kern, meget gode spesifikasjoner for både naturfag, biologi og kjemi. Utformet slik at den kan stables og dermed spare plass. Stor veiepanne av kunststoff.

Spesifikasjoner:

- Veieområde: 0-620g
- Nøyaktighet: 0,1g
- Strøm-kilde: 2 x 1,5 V LR06 (inkl.) eller nettadapter

NÅ 476,-



Vekt 500 g/ 0,01 g, Kern EHA 500-2

806037	NOK 1390
--------	----------

Utmerket, nyutviklet skolevekt for kjemiundervisning og naturfag generelt. Vekta har stor nøyaktighet (0,01 g), er responsrask og gir repeterbare resultatet.

Spesifikasjoner:

- Måleområde: 0 - 500 g
- Oppløsning: 0,01 g
- Veieplate: 105 mm i rustfritt stål
- Strømkilde: strømkabel (inkludert) eller batteri (9V batteri, ikke inkludert)

NÅ 1154,-



Vekt, Digital 5000 g/1g

806012	NOK 286
--------	---------

Slank digitalvekt med måleområde 0-5000 g. Nøyaktighet 1g. Store lettlesle tall på 20 mm. Egner seg godt i kjemi som en grovvekt eller som vekt i matematikk. Stor veieplate i rustfritt stål.

Spesifikasjoner:

- Måleområde/nøyaktighet: 5000 g/ 1 g.
- Strømkilde: 2 x 1,5 V LR03-batterier (inkl.)

NÅ 206,-




Kjemisett

Vi har sammen med en erfaren kjemilærer laget 12 komplette kjemisett som dekker læreplanens mål for grunnskole og videregående skole. Settene leveres komplett med kjemikalier, utstyr og det du behøver. På toppen får du detaljert norsk veiledning og videopresentasjon.

Introduksjonspris på våre kjemisett, kun kr. 49,- per sett. Prisen gjelder til 30.1.2026

Lag slim

207121	NOK 95
--------	--------

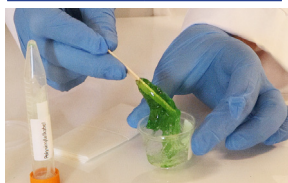

KUN 49,-

Lag Hydrogengass

207018	NOK 95
--------	--------



KUN 49,-

Kjemisk trafikklys

207103	NOK 90
--------	--------



KUN 49,-

Jakten på utfellinger

207112	NOK 105
--------	---------



KUN 49,-

Kjennetegn på kjemiske reaksjoner

207105	NOK 95
--------	--------



KUN 49,-

Påvisning av karbondioksid med kalkvann

207107	NOK 85
--------	--------



KUN 49,-

Kjemisk reaksjon med sukker

207027	NOK 105
--------	---------



KUN 49,-

Testing av skolens indikatorer


207110	NOK 105
--------	---------



KUN 49,-

Lag ditt favoritt bruspulver

207012	NOK 95
--------	--------

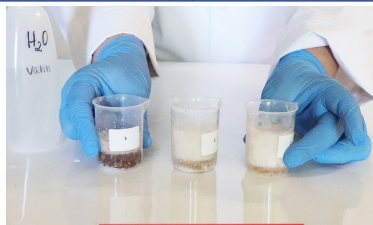

KUN 49,-

Nøytralisering av syre og base

207114	NOK 95
--------	--------



KUN 49,-

**For flere forsøk, forsøksvideoer, tips og veiledninger
se www.labdidakt.no**



NÅ 218,-

Dyrecelle

309016	NOK 250
--------	---------



NÅ 218,-

Plantecelle


309015	NOK 250
--------	---------



NÅ 1033,-

Dyrecelle stor (48 cm) modell

309013	NOK 1245
--------	----------

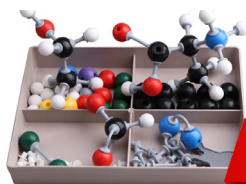


NÅ 210,-

Molekylbyggesett Organisk

PLUSS

205019	NOK 250
--------	---------

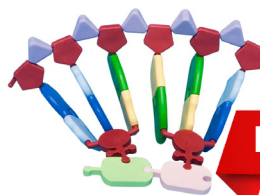


NÅ 170,-

RNA-byggesett,

12 base-proteinsyntese

308010	NOK 198
--------	---------

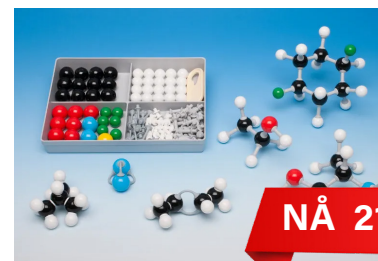

NÅ 213,-

Molekylbyggesett: Molymod-001

Organisk

205002	NOK 250
--------	---------



NÅ 273,-

Atommodell fra Bright, elev

205008	NOK 325
--------	---------



NÅ 1295,-

Atommodell fra Bright, lærer

205009	NOK 1524
--------	----------



NÅ 246,-

DNA 12 lags byggesett Molymod

308002	NOK 286
--------	---------



NÅ 171,-

Grafitt modell


205031	NOK 197
--------	---------



NÅ 171,-

Natriumklorid modell

205030	NOK 197
--------	---------

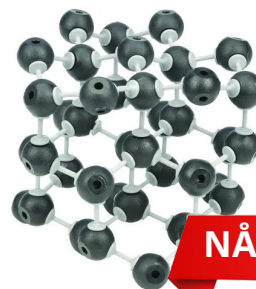

NÅ 143,-

Diamant modell

205032	NOK 164
--------	---------

Håndgenerator med glødelampe

105024

NOK 95

Generatoren er montert i et gjennomsiktig plastkabinett. Med sveiv og utvekslingsgir oppnås en effekt på inntil 7,5W. Generatoren er utstyrt med lampefatning for E10 glødelampe og ledninger med krokodilleklemmer for tilkobling av brenselceller, måleinstrumenter og elektriske kretser.



NÅ 68,-

Solcellebil med oppladbart batteri

105012

NOK 142

Fin solcellebil som leveres inkludert oppladbart batteri. Bilen kan drives direkte av sollyset eller ei sterk lampe eller man kan lade opp batteriet og la det drive bilen.



NÅ 105,-

Vindgenerator med diode

105040

NOK 225

Vindgenerator bygget opp av motor påmontert propell. Motoren er koblet til en lysdiode som lyser når propellen snurrer rundt. Fin modell av en vindmølle og beskriver tydelig generatorprinsippet og flere energioverganger.



NÅ 178,-

Fornybar energi, undervisningssett

105029

NOK 3500

Dette settet inneholder de fleste komponenter du behøver for å demonstrere fornybare energikilder i klasserommet. Forsyn en elektrisk krets fra en solcelle eller en vindmølle med profilvinger basert på NASA-teknologi. Produser hydrogen ved elektrolyse av vann og omdann hydrogenet til elektrisk energi i en PEM brenselcelle. Eller - kombiner fritt og utforsk sammen med dine elever hvilke muligheter og utfordringer det ligger i overgang fra gammel til ny teknologi.

Inneholder: Småskala vindmølle, solcelle, brenselcelle, elektrolyseapparat, variabel motstand, LED-indikator, kabler med mer.

NÅ 2870,-



Brenselcellebil med solcelle

105026

NOK 1012

Brenselcellebil med reversibel brenselcelle og solcelle. Med elektrisk energi fra solcellen spaltes vannet til hydrogen og oksygen og lagrer gassene i to tanker.



NÅ 860,-

Smelteblokker

105107

NOK 159

To blokker, tilsynelatende like, men med helt forskjellige fysiske egenskaper. Legg en isbit på hver blokk. I løpet av sekunder vil kun den ene av dem begynne å smelte. Her blir det garantert diskusjon!




NÅ 111,-

Solfanger med solcelledrevet pumpe og tank

105017

NOK 1590



Nyutviklet gedigen platesolfanger med plateareal 55 x 35 cm. Stor sortlakkert plate og mange sløyfer sikrer rask oppvarming av vannet.

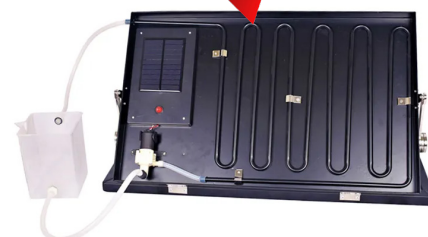

NÅ 1034,-

Måling og måleutstyr

Et IR-kamera registrerer infrarød stråling fra objekter og konverterer dette til bilder eller video som viser temperaturforskjeller i et område. Hver temperatur representeres av en farge. I naturfagene byr dette på mange muligheter, ta bilder av klassen, kroppsdeler, endoterme/eksoterme reaksjoner, vis termisk ledningsevne og sammenhengen mellom energi og temperatur. Stream bildene direkte til din storskjerm med gratis app.

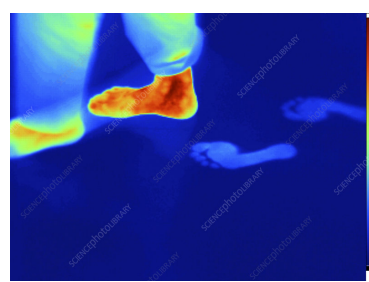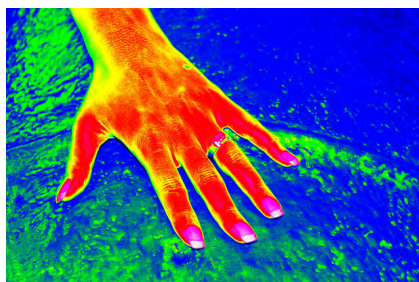

Varmeledning



Termisk kamera Hikmicro

Pocket 2 med wifi

806005

NOK 6500

Kompakt termokamera med Wifi og touchskjerm.

Spesifikasjoner:

- Termisk oppløsning: 256 x 192 (49 152 piksler)
- Nøyaktig måling av temperatur fra -20°C til 400°C
- Erstatte FLIR C5

NÅ 5005,-



Termisk kamera Hikmicro

Mini2Plus V2

805113


NOK 3590

Termokamera kompatibelt med smarttelefoner.

Inkludert:

- 1 x Bærekoffert
- 1 x forlengelsesledning
- 1 x Ekstra langt adapter
- 1 x Brukerhåndbøker

NÅ 2944,-

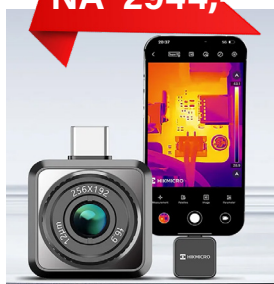

Termisk kamera Hikmicro

Eco-V

805112

NOK 3490

Prisgunstig håndholdt IR-kamera med skjerm.

Inkludert:

- 1 x Håndleddsrem
- 1 x 2-i-1 USB-C til USB-CA-kabel
- 1 x Termisk kamera
- 1 x Trykt hurtigstartveiledning
- 1 x Kalibreringssertifikat

NÅ 2618,-



Se produkttekst og produktvideoer, tips og veiledninger på www.labdidakt.no

Fysikkofferter for mellomtrinnet - Alle med norsk veiledninger!

Varmekofferten CVK med norsk veiledning

106001

NOK 6750

Varmer er et aktuelt tema uansett årstid. Denne kofferten muliggjør lærerike og spennende praktiske elevøvelser for å lære om og forstå begreper knyttet til temaet. Elevene lærer om frysepunkt, kokepunkt, prinsippet for væskefylte termometere mht. utvidelse og sammentrekning av væsken som en følge av endring i temperatur. Dessuten vil de lære om begrepene fordampning og kondensasjon. Ved hjelp av komponentene kan man bygge enkle termometere, finne vannets frysepunkt og kokepunkt med et termometer uten skala, lære å bruke Celsiusskalaen og måle temperatur i forskjellige medier; kaldt vann fra springen, varmt vann, lufta i klasserommet og lufta utendørs. Prinsippet for hvordan et analogt febertermometer brukes og fungerer, kan også forklares da de fleste barn i denne aldersgruppen har en relasjon til begrepet «feber». Utstyr til 15 grupper



NÅ 5738,-

Magnetismekoffert CVK med norsk veiledning

106002

NOK 8500

Dette settet muliggjør lærerike og spennende praktiske elevøvelser for å lære og forstå begrepet magnetisme. Elevene lærer at ulike stoffer har ulike magnetiske egenskaper, at magneter har krefter, at de kan tiltrekke og frastøte hverandre og at magnetisme medfører at vi kan orientere oss med et kompass (sammen med et kart) ifht. magnetisk nord- og sydpol. Elevene kan med settet blant annet utforske: Hvorfor er ikke alle stoffer magnetiske? Hva brukes magnetisme til? Hvordan brukes et kompass? Ved hjelp av komponentene kan man selv finne nord- og sydpol ved å bruke umerkede magneter. Settet lar også elevene sette sammen og bruke et kompass og på den måten tilegne seg kunnskap og forståelse om hvordan et kompass virker og hvorfor vi kan bruk det til å orientere oss geografisk. Utstyr til 15 grupper.



NÅ 7225,-


Elektrisitetskoffert CVK med norsk veiledning

106003

NOK 6950

Elektrisitetskofferten inneholder utstyr til 15 grupper og de vanligste komponenter innenfor elektrisitetslære. Med denne koffertene kan elevene selv eksperimentere med strøm på en ufarlig måte og får svar på mange grunnleggende spørsmål: Hva er egentlig elektrisk strøm? Hvorfor lyser ei lampe? Hvordan kan vi lage varme av elektrisk strøm? Hva er et batteri og hvordan fungerer det? Hva er forskjellen på en leder og en isolator.

Alle deler har sin egen plass i kofferten noe som gjør det enkelt å holde orden på utstyret.

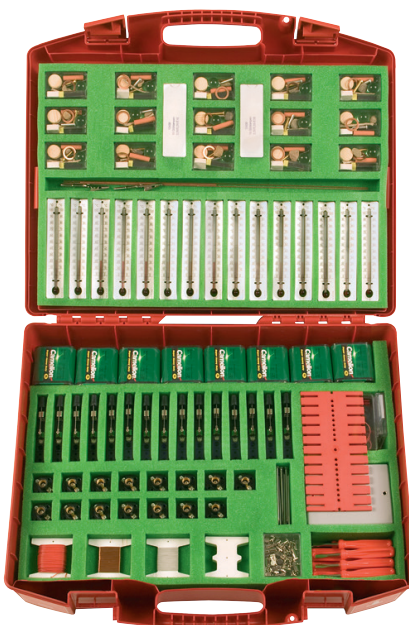

NÅ 5907,-

Luftkofferten CVK med norsk veiledning

106005

NOK 7650

Vi er konstant omgitt av luft, vi puster den inn og ut og vi beveger oss rundt i den hele tiden. Siden luft for det meste er «usynlig», er det naturlig for barn å tenke at luft er «ingenting». Luftkofferten muliggjør lærerike og spennende praktiske elevøvelser for å lære og forstå at luft absolutt ikke er «ingenting» - men at det tvert imot er et konkret og håndgripelig medium med helt spesifikke egenskaper som eksempelvis: Luft tar opp plass. Luft utøver kraft. Luft består av partikler. Luftforurensning. Ved hjelp av komponentene kan man bygge enkle raketter, vise hvordan ei sykkelpumpe fungerer, demonstrere enkle fysiske lover og demonstrere hvordan luft kan erstatte andre medier. At luft ofte er forurensset, kan også enkelt og lettfattelig vises gjennom forsøk som dette settet muliggjør. Utstyr til 15 grupper.



NÅ 6503,-

Båndgenerator med motor, sveiv og utstyr

102122

NOK 3960

En Van de Graaf-generator, også kalt båndgenerator, er en elektrostatiske generator som kan produsere svært høye spenninger. Strømstyrken er imidlertid lav, så den er ufarlig for normalt friske mennesker. Generatoren består av et bevegelig belte som transporterer elektriske ladninger til en hul metallkule, hvor ladningene samles og bygger opp en høy spenning. Den ble oppfunnet av den amerikanske fysikeren Robert J. Van de Graaff i 1929, derav navnet, og brukes til å demonstrere elektrostatiske prinsipper. Et must i enhver fysikklab!

- Spenning, opptil 200000 V
- Høyde, 72 cm
- Kule, Ø 26 cm, Utladerstang, Hårdusk, Propell
- Sikring

NÅ 2970,-



Elektrostatikk-sett

102107

NOK 237

Dette er et komplett sett for å undersøke mange sider ved statisk elektrisitet.

Settet inneholder:

- Holder for staver med kulelager.
- Elektrostatiske pendel.
- Skinnduk 15x15 cm.
- Silkeduk 15x15 cm.
- Pleksiglasstav.
- Glasstav.
- Ebonittstav.
- Delt stav messing & pleksiglass.
- Delt stav glass & pleksiglass.



NÅ 190,-

Spenningskilde, "SLIM LINE" 30 V DC 5A

102039

NOK 979

Funksjonssterk spenningskilde, lett og praktisk å håndtere og tar minimalt med plass. Pedagogisk display der spenning vises i grønt og strøm i rødt.

- Likespenning 0 – 30 V stabilisert.
- Likestrøm 0 – 5A, rippelspenning mindre enn 50 mV
- Display V : Grønn, nøyaktighet 0,1 V
- Display A : Rødt, nøyaktighet 0,01 A
- Utganger: Pluss, minus og jord. Passer vanlige kabler og sikkerhetskabler.
- Sikring : Glassikring 1,6 A



NÅ 685,-

Amperemeter, likestrøm

102046

NOK 97

Måling av strøm

- Måleområder: 0-5 ampere og 0-1 ampere.
- Nøyaktighet: $\pm 2\%$.



NÅ 80,-

Voltmeter, likespenning

102045

NOK 97

Måling av spenning.

- Måleområder: 0-5 volt og 0-15 volt.
- Nøyaktighet: $\pm 2\%$.



NÅ 80,-

Galvanometer

102047

NOK 97

Analogt galvanometer (eller mikroamperemeter) for måling av svake strømmer.

- Måleområde: -500 til + 500 mikroampere.
- Nøyaktighet: $\pm 2\%$.



NÅ 80,-



NÅ 35,-

pH-papir 0-14, 100 strips

206247

NOK 50




NÅ 25,-

pH-papir 0-14, rull

206250

NOK 35

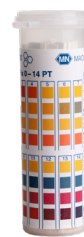

NÅ 92,-

pH-strips Macherey Nagel

pk a 100 strips

206255

NOK 154



Spar 15%

Filterpapir kvalitativt, pk a 100 stk

804018	Ø 90 mm	NOK 21	NOK 18
804019	Ø 125 mm	NOK 32	NOK 27
804020	Ø 150 mm	NOK 43	NOK 37



Spar 15%

Standflaske

805103	100 ml	NOK 28	NOK 24
805104	250 ml	NOK 32	NOK 27
805105	500 ml	NOK 49	NOK 42



Spar 10%

Medisinflaske

805082	100 ml	NOK 16	NOK 14
805083	250 ml	NOK 25	NOK 23
805084	500 ml	NOK 35	NOK 32



Spar 20%

Begerglass

201172	100 ml, pk 12stk	NOK 150	NOK 120
201173	250 ml, pk 8 stk	NOK 125	NOK 100
201174	400 ml, pk 8 stk	NOK 195	NOK 156



Spar 20%

Målesylinder

201024	100 ml, pk 2 stk	NOK 50	NOK 40
201025	250 ml, pk 2 stk	NOK 72	NOK 58



Spar 25%

Erlenmeyerkolbe

201188	50 ml, pk 12 stk	NOK 170	NOK 128
201189	100 ml, pk 12 stk	NOK 185	NOK 139
201190	250 ml, pk 12 stk	NOK 235	NOK 176



Spar 25%

Målekolbe med propp

201042	50 ml	NOK 49	NOK 37
201043	100 ml	NOK 59	NOK 44
201044	250 ml	NOK 95	NOK 71

Skumterninger, pakke a 200 stk.

403205	NOK 435
--------	---------

Settet inneholder 200 klassiske terninger i fast, vaskbart skummateriale. Fordelen med å bruke skumterninger er blant annet at de lager mye mindre støy når mange grupper bruker dem samtidig i klasserommet.

- Materiale: Vaskbart skummateriale
- Mål: 17x17x17 mm
- Antall: 200 stk



NÅ 369,-

Terning 6-sidig med tall, 60 stk

403200	NOK 195
--------	---------

Rimelige terninger. Passer til f.eks. spill eller sannsynlighetsberegning.

- Materiale: Tre.
- Mål: 18x18x18 mm
- Farge: 15 gule, 15 grønne, 15 røde og 15 blå.



NÅ 166,-

Kuber tilmatteeksperimenter, 10x10 stk.

403207	NOK 180
--------	---------

Store fargerike kuber som kan settes sammen. Ideell for praktisk matematikk-undervisning. Fem av kubens sider har et hull, og den sjette siden har en «knott», noe som betyr at alle former kan konstrueres.

- Materiale: Plast.
- Emballasje: 100 stk. 10 stk. av hver farge.
- Mål: 20x20x20 mm.



NÅ 144,-


Basis 10-sett

403206	NOK 295
--------	---------

Fargerikt sett som konkretiserer tallsystemet og volumenhetene. Vis for eksempel størrelsen på 1 ml, 1 cl, 1 dl og at 1 l = 1 dm³.

Ett sett består av:

- 1 rød tusen-kube, 10 blå hundre-plater,
- 10 grønne ti-stenger, 100 gule enkelt-kuber.
- Kubene, platene og stengene er merket med enkelt-sifre.
- Materiale: Lett og svært sterk plast.
- Dimensjoner: Enkeltkubene er 1x1x1 cm og veier 1 g.
- Plastoppbevaringsboks inkludert.

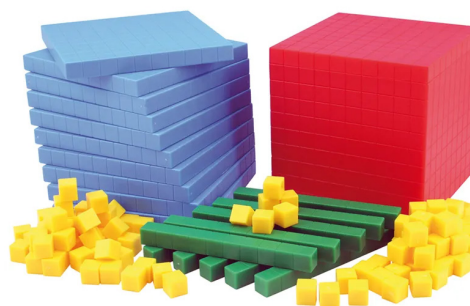


NÅ 236,-

Kubikkdesimeter

403208	NOK 370
--------	---------

Gjennomsiktig plexiglasskub med sider som måler 1 dm. Fyllt med 10 plan. Ett av planene er delt inn i 100 firkanter, ett plan i 10 stenger, hvorav den ene er delt inn i 10 kuber.

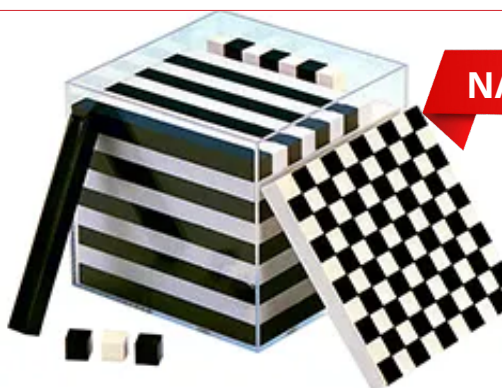

NÅ 296,-

Sky-Watcher Mercury 705 AZ3

702036

NOK 3950

For 400 år siden lagde Galileo Galilei verdens første teleskop. Formatet er like bra og anvendelig fortsatt, og montert på et enkelt men robust stativ, er dette et optimalt nybegynnerteleskop eller teleskop du lett kan ta med deg på reisen.

Spesifikasjoner:

- Forstørrelser (med okularene som følger med): 20x og 50x
- Høyeste mulige forstørrelse: 140x
- Objektivdiameter: 70 mm
- Brennvidde: 500 mm (f/7.14)
- Medfølgende okularer (1,25 tommer): 10 mm og 25 mm
- Rød-punktsikte
- 45° rettvenderprisme 1,25"
- AZ3 Alt-Azimuth-montering
- Aluminiumstativ med tilbehørsbrett
- 36 % mer lyssamling enn 60 mm



NÅ 3358,-



NÅ 779,-

Solsystemet med motor og lys

701013

NOK 950

Batteridrevet modell av solsystemet, som viser solen og 8 planeter. Mulighet for å dekke "solen" og vise den nordlige stjernehimmelen (solen fungerer som nattlys med auto-off).

Tegnoglobus med 4 tusjpenner i ulike farger

104052

NOK 995

Tegnoglobus med omriss av kontinenter og store elver inntegnet.

Hvit globus (30 cm diameter) med omriss av kontinenter, store landegrensler og store elver inntegnet. Globusen kan brukes på mange måter, tegn havstrømmer og forstå for eksempel Golfstrømmen, spør hverandre om navn på land, hovedsteder og mye mer! Inkluderer 4 tørkbare tusjpenner i forskjellige farger, slik at du kan tegne direkte på globusen. Globusen er enkel å tørke ren så lenge du bare bruker tusj som kan tørkes av (mange whiteboard-penner kan enkelt tørkes av, men det er lurt å sjekke før bruk).



NÅ 796,-

Planetkort, på norsk, tre ulike spill

701025

NOK 249

Et underholdende kortspill hvor den som lærer seg mest om solsystemet, har størst sjanse for å vinne. Kortene kan brukes til å spille tre ulike spill. Kortene kan brukes som et didaktisk verktøy for å lære om solsystemet eller som ekstraaktivitet i naturfaget eller andre fag. Kortene er laminerte og meget slitesterke.

- Klodenes kamp, fra 8 år - 2-4 spillere
- Bygg solsystemet, fra 9 år, 2-4 spillere
- Rummy, fra 11 år, 2-3 spillere
- Norske tekster.



NÅ 187,-


Planisfære (stjernehjul)

701026

NOK 195

Planisfære (stjernehjul) er stjernekartet som alltid kan vise deg stjernehimmel akkurat nå eller til et valgt fremtidig tidspunkt. Den viser hva som befinner seg på stjernehimmelen, i forhold til din lokale horisont. Still inn dato og klokkeslett og løft kartet over hodet, så vil du raskt finne igjen både kjente og ukjente objekter på himmelen.

- Norske tekster.

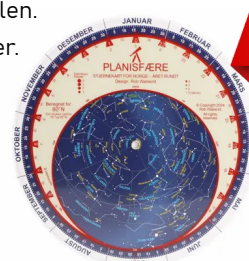

NÅ 146,-

Tellurium med lys, økonomi

702040

NOK 980

Brukervennlig læremidler for å forklare den innbyrdes posisjonen til sola, jorda og månen. Sola har innebygget LED-lys. Forklar enkelt årstider, dag/natt, solformørkelse og mye mer.

• Størrelse : 31 x 41x 12 cm (H x B x L)



NÅ 735,-


Vannets kretsløp, modell

104045

NOK 590

Pedagogisk og åpen modell som viser vannets kretsløp med fordamping fra "havet" og kondensasjon over "fjellet". Forsøket gjøres ved at man fyller vann i "havet" og is i "skyen". Bruk en bordlampe (ikke inkludert) og varm opp "havet". Etter litt tid begynner det å regne over fjellet og regnvannet renner tilbake i "havet".

• Størrelse : 52 x 31 x 12 cm

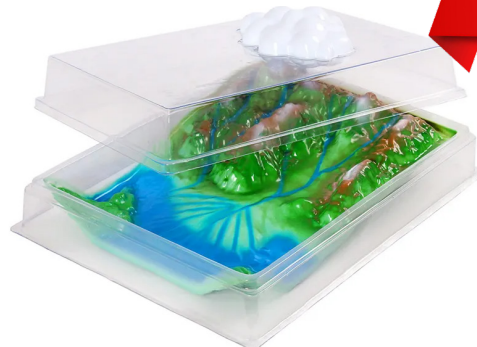

NÅ 413,-

Skummodell jordens indre

701027

NOK 234

Skummodell av jordkloden med hevede kontinenter. Kan deles i to så man kan se jordens indre med angivelser (miles og km) av dybde og temperatur.



NÅ 199,-

Værstasjon, transportabel

104034

NOK 590

Smart værstasjon (barometer, termometer og hygrometer) i en bærbar versjon, som også kan skilles fra hverandre og brukes hver for seg.



NÅ 443,-

Lysmåler mini

104036

NOK 380

Kompakt lysmåler med bakgrunnsbelyst display og høy nøyaktighet (+/-4 %). Minne for høyeste og laveste måleverdi. Måler i lux eller FC.

• Måleområde: 0-200 000 lux.

• Automatisk avslåing (15 min).



NÅ 266,-

Termometer og luftfuktighetsmåler

104025

NOK 395

Luftfuktighetsmåler og termometer med bakgrunnsbelyst LCD-display med tre sifre. Viser temperatur og luftfuktighet samtidig. Min.-/maksfunksjon registrerer de høyeste og laveste målte temperaturene. Automatisk avslåing etter 5 minutter uten aktivitet.

• Måleområde for luftfuktighet: 0 til 99 %

RH (+/-5 %).

• Temperaturområde: -10 til 60°C (+/-1 °C).

• Oppløsning: 0,1 °C.



NÅ 277,-

Vindmåler og termometer

104012

NOK 380

Anemometer med bakgrunnsbelyst display og innebygd termometer. Flere ulike enheter for vindhastighet, f.eks. m/s og km/h. Automatisk eller timerinnstilt avslåing og batteriindikator.

• Måleområde: 0 til 30 m/s (1-108 km/h). Nøyaktighet: +/-5 %.

• Temperaturområde: -10 til 50 °C (+/-2 °C).



NÅ 266,-

Kjemikalier med tips om bruk

Varenr.	Navn	Eksempel på bruk	Pris
206000	Aceton, kjemisk ren , 1L		175,-
206004	Ammoniakk konsentrert, 1000ml	Diffusjon (magisk røyk) i åpent rør. Lage fortynnet løsning av ammoniakk til ulike forsøk	130,-
206012	Ammoniumacetat, 100 g	Sjekk lærebøker	132,-
206006	Ammoniumhydrogenkarbonat (horn-salt) 250 g	Undersøke nye stoffer ved oppvarming	90,-
206007	Ammoniumnitrat 250 g	Endoterm reaksjon	190,-
206020	Bariumklorid 2-hydrat, 500 g		472,-
206026	Bromtymolblått, BTB, 0,04 % 1000 ml	Syre base indikator. Fargeendring når vi blåser ned i vann tilsatt litt BTB.	127,-
206035	Bufferløsning , Ph 4, 1000 ml	Kalibrering av pH-meter	290,-
206037	Bufferløsning, Ph 7, 1000 ml	Kalibrering av pH-meter	290,-
206040	Bufferløsning, Ph 10, 1000 ml	Kalibrering av pH-meter	290,-
206052-1l	Demineralisert vann-1L	Labvann. Vann som ikke inneholder ioner, salter eller mineraler.	39,-
206097	Druesukker, 250 g	Påvisning med Fehlings væske	72,-
206061	Eddik 7% (husholdningseddik)	Nøytralisasjon. Massebevaring. Lage CO ₂ .	50,-
206060	Eddiksyre 32%, 1L	Lage en fortynnet løsning til bruk i andre forsøk	138,-
206064	Etanol 93%, denaturert, 500ml	Lage indikatorløsninger, feltarbeid med konservering av smådyr	95,-
206086	Fehling A 500 ml	Påvisning av monosakkarider	98,-
206085	Fehling B 500 ml	Påvisning av monosakkarider	165,-
206091	Fenolftalein 0,1% 100 ml	Syre base indikator	45,-
206088	Fruktose, 500g	Påvisning med Fehlings væske	95,-
206097	Glukose (druesukker), 250 g	Påvisning med Fehlings væske	72,-
206098	Glyserol 99,5%, 1000 ml	Til hudkremforsøk	165,-
206115	1 - Heksanol 200 ml	Undersøke alkoholer, løsemiddel for upolare stoffer	127,-
206113	Hydrogenperoksid 10 %, 1000 ml	Endoterme eller eksoterme reaksjoner - kjemisk energi	185,-
206112	Hydrogenperoksid 35%, 1000 ml	Til forsøket Elefanttannkrem	295,-
206119	Indigokarmin, 10g		280,-
206134	Jod-kaliumjodid 250 ml	Påvisning (blåfarging) av stivelse	195,-
206140	Kaliumaluminiumsulfat (alun) 500g	Dyrking av krystaller	120,-
206139	Kaliumhydroksid , 100g	Tørkemiddel.	105,-
206143	Kaliumjodid, 100 g	Til forsøket Elefanttannkrem. Lage jod-løsning.	330,-
206138	Kaliumklorid, 99 %, 250g	Flammeprøve	160,-
206145	Kaliumpermanganat, 250 g	Framstilling av oksyngengass	182,-
206146	Kalkvann, 1000 ml	Blakking, påvise karbondioksid	76,-
206148	Kalsiumhydroksid, hydratkalk , 500g	Lage kalkvann	165,-
206149	Kalsiumkarbid , 500 g	Lage "gruvelukt" - reaksjon med vann, acetylen (etyn)	385,-

Kjemikalier med tips om bruk

Varenr.	Navn	Eksempel på bruk	Pris
206150	Kalsiumkarbonat, pulver, kritt, 500 g	Regulere pH.	97,-
206152	Kalsiumklorid 77 % , 400 g	Flammeprøve. Kjemisk energi	195,-
206155	Kobber(II)klorid dihydrat, 200g	Elektrolyse.	265,-
206157	Kobber(II)sulfat, pentahydrat 500 g	Krystalldyrking. Kobbersulfatløsning: Galvanisk element. Lage Fehling A.	175,-
206167	Kull, aktivt, granulert 200 g	Rensing av vann	164,-
206187	Lykopodiumpulver 100 g	Til demo av støveksplasjon	715,-
208017	Magnesiastaver 25 stk.	Flammeprøve med salter	154,-
206193	Magnesiumbånd, rull 25 g	Framstilling av hydrogengass. Brenne megnesium - redoksreaksjon.	98,-
206205	Mangan(IV)oksid, (brunstein) 250 g	Framstilling av oksyngengass	195,-
206212	Natrium metall 100 g	Kraftig reaksjon med vann	1140,-
206229	Natriumhydrogenkarbonat (natron), 1kg	Framstille karbondioksidgass (brannslukker). Nøytralisasjon. Lage bruspulver. Massebevaring.	175,-
206215	Natriumhydroksid, mikroperler, 500 g	Lage natronlut. Nøytralisasjon.	195,-
206216	Natriumkarbonat 10 H ₂ O 1000g	Gir basisk løsning.	160,-
206223	Natriumklorid > 99,8 % ,1kg	Flammeprøve. Massebevaring.	50,-
206234	Natriumsulfat, 250 g	Elektrolyse av vann.	190,-
206220	Natriumtetraborat (boraks) 500g	Til forsøket med å lage slim	195,-
206230	Natriumthiosulfat pentahydrat, teknisk, 500g	Kjemisk analyse, titrering. Kobber i kranvann.	190,-
206232	Nilrødt, 100g		2490,-
206256	Parafinolje, rensed 1000 ml	Til forsøket med å lage hudkrem	260,-
206257	Parafinvoks, 500 g	Til forsøket med å lage hudkrem	110,-
206252	Polyvinylalkohol 100 g	Til forsøket med å lage slim	220,-
206272	Saltsyre 10%, Løsning 1000 ml	Forsøket med sink og saltsyre. Nøytralisasjon.	94,-
206271	Saltsyre konsentrert 1000 ml	Lage fortynnet løsning til bruk i ulike forsøk	195,-
206275	Sink, granulert 500 g.	Framstille hydrogengass sammen med saltsyre	209,-
206297	Sinksulfat, 250 g	Sinksulfatløsning: Galvanisk element.	180,-
206276	Sitronsyre, 250 g	Lage hydrogengass med magnesium. Lage bruspulver.	120,-
206280	Stearinsyre (Oktadekansyre) 250 g	Til forsøket med å lage hudkrem	150,-
206279	Stivelse vannløselig 250 g	Lage stivelsesløsning. Reaksjon med jodløsning.	150,-
206283	Stålull uten såpe	Undersøke rusting. Antenne stålull med et batteri.	175,-
206290	Svovelpulver 500 g	Framstilling av sur nedbør	275,-
206287	Sølvnitrat, 20g	Fellingsreaksjon. Titrering. Kvalitativ analyse.	390,-
206295	Trietanolamin 200 ml	Til forsøket med å lage hudkrem	125,-

FLEKSIBEL MOBILOPPBEVARING!

Lett og solid kasse til oppbevaring av mobiltelefoner eller lommeregnerne. Kassen er laget i kraftig PP plast og har håndtak av aluminium. Innsatsen med 30 rom er av holdbar PE plast. Har plass til 30 lommeregnerne eller tilsvarende antall mobiltelefoner. Kan brukes for lommeregnerne eller mobiltelefoner med en maksimal bredde på 77 mm og maksimal dybde 14 mm. Utsparingen er stor nok til de nye pluss-telefonene som er ekstra brede.

- Materiale: Boks av plast (PP) med håndtak av aluminium.
- Innsats av polyetylencelleplast.
- Mål: 420 x 255 x 210 mm.
- Vekt: 530 g.

MOBILKASSE

VARENR.: 801027 NOK 286

